

INFORME TÉCNICO

O.T. N° 56981

Cliente	:	Promaiz S.A.
Dirección	:	Av. Jaime Guzmán S/n, Km 7.5, Isla de Maipo
Contacto	:	Anthony Greig Olmedo
Correo	:	agreig@promaiz.cl
Equipo	:	Estufa de Incubación
Marca	:	Binder
Modelo	:	BD53
Serie	:	12-16163
Técnico	:	Manuel Tapia
Fecha Visita	:	17 de Enero de 2017

Actividad a realizar

- ✓ Inspección general
- ✓ Verificación estructural del equipo
- ✓ Verificación de controles y comandos
- ✓ Verificación de partes, piezas y accesorios
- ✓ Lugar libre de polvo y suciedad
- ✓ Superficie de posición de equipo, nivelada y estable
- ✓ Revisión de sellos de puerta conforme
- ✓ Revisión de sellos de cámara aisladora interna
- ✓ Revisión de sistema de ventilación conforme, escotilla
- ✓ Revisión de control de sistema de ventilación
- ✓ Funcionamiento de humidificador conforme
- ✓ Equipo se encuentra operativo

Verificación de funcionamiento

- ✓ Revisión de red eléctrica de alimentación adecuada
- ✓ Encendido y arranque correcto de equipo
- ✓ Revisión de control de temperatura (Contrastación)
- ✓ Revisión de termostato de control
- ✓ Revisión de termostato de seguridad
- ✓ Revisión de funcionamiento de temporizador
- ✓ Revisión de sensor de temperatura
- ✓ Revisión de sistema eléctrico y/o electrónico
- ✓ Revisión de contacto y terminales eléctricos
- ✓ Revisión de motor y hélice de ventilación
- ✓ Revisión de display análogo y/o digital

Trabajo preventivo


- ✓ Desarme del equipo
- ✓ Limpieza de carcasa
- ✓ Limpieza filtro de aire
- ✓ Limpieza condensador
- ✓ Lubricación de partes móviles
- ✓ Configuración de parámetros
- ✓ Ajuste termómetro digital
- ✓ Ajuste temperaturas pre-seteadas
- ✓ Ajuste de offset
- ✓ Armado y puesta en marcha
- ✓ Ajustes mecánicos de piezas móviles
- ✓ Contrastación de parámetros con termómetro patrón
- ✓ Pruebas de funcionamiento
- ✓ Equipo funcionando correctamente, operativo

Medidas Obtenidas:

- | | | |
|-----------------|---|------|
| • T° prefijada | : | 60°C |
| • T° en display | : | 60°C |
| • T° Patrón | : | 60°C |

Observaciones:

- ❖ Equipo opera correctamente de acuerdo a parámetros establecidos por fabrica.-

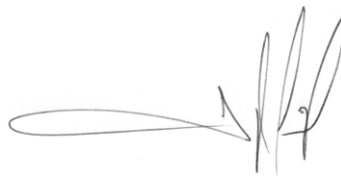

Gonzalo Cánaves S.
Jefe Servicio Técnico
Instrumentación

/bal